

4Blind | Для
безграничных
возможностей

Презентация
Коммуникатора
ВиброБрайль

Мобильная версия
презентации



t.ly/Xlls

01/14

Содержание

проблема

решение

говорить и слышать

видео

тесты

пользователи

технические характеристики

режимы использования

комплектация

контакты

Продолжительность
презентации

3 МИН

Проблема

В России всего 124 тотально слепоглухих человека, люди которые не видят, не слышат и не могут говорить.

Единственно возможный способ поговорить с другими людьми — это язык жестов с помощью тифлосурдопереводчика.

Статистика: t.ly/SoYK



Решение

Коммуникатор ВиброБрайль — первое в мире персональное устройство для людей с одновременным нарушением зрения, слуха и речи.

Устройство позволяет говорить синтезированным голосом и слышать речь собеседника.



Говорить

Процесс общения начинается с набора слов с помощью шести основных кнопок. Текст вводится по Брайлю.

После окончания ввода слов программа синтеза речи моментально озвучивает набранное и собеседник слышит что сказал пользователя.



СЛЫШАТЬ

Для того чтобы услышать собеседника пользователю достаточно активировать программу распознавания речи.

Делается это нажатием одной кнопки — программа распознает слова и передаст их пользователю в виде вибраций на те же шесть кнопок.



Видео

Посмотрите как работает коммуникатор ВиброБрайль на видео по ссылке:

youtu.be/ku0_E03ww8Q



Результаты тестов

~3-5

МИНУТ

Период обучения

35

СЛОВ В МИНУТУ

Скорость
распознавания речи

46

СЛОВ В МИНУТУ

Скорость набора
текста

08/14

Пользователи

Коммуникатор — универсальное устройство, которое может использоваться различными категориями пользователей.

Типы	Говорить	Слышать	Читать
С отсутствием зрения, слуха и голоса	+	+	
С отсутствием зрения и слуха		+	
С отсутствием зрения и голоса	+		
При нарушениях речи	+		
С низкой чувствительностью пальцев			+


Характеристики

- Вес устройства: 141 г
- Размер (см.): 14/6/1
- Порт зарядки: Micro USB
- Аккумулятор: 800 мАч
- Время работы: от 6 до 8 часов



Настройки

- Доступна регулировка скорости передачи слов (для новичков)
- Доступен режим обучения «учитель-ученик»
- Доступна регулировка силы вибрации при передаче слов собеседника.

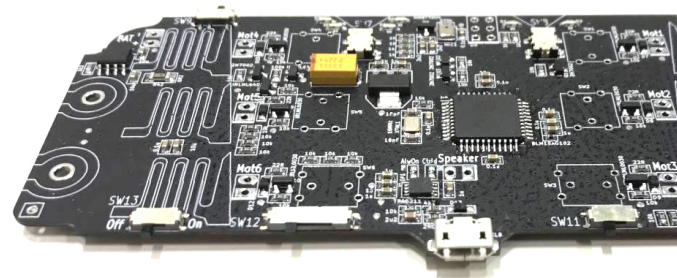

Дополнительно

- Требуется знание принципа Брайля * (* навык тактильного чтения шрифтом Брайля не требуется)
- Подходит для людей с низкой чувствительностью пальцев
- Работает в паре с Android версии не ниже 8.1
- Обновления доступны в Google Play

Комплектация

- Коммуникатор
- Кабель для зарядки Micro-USB с быстрым магнитным соединением
- Ремешок на шею для ношения устройства
- Велюровый чехол
- Визуальное руководство пользователя
- Руководство пользователя по Брайлю



Мы сосредоточены на расширении возможностей слепых и слепоглухих сообществ и устранении препятствий, с которыми они сталкиваются в общении, образовании, трудоустройстве, транспорте и независимой жизни.

Контакты

welcome@4blind.com

www.4blind.com

+7 495 128 8687